

Paquete de Cadera

Código: 75-P800S



Empaque:

6 unidades / caja




Descripción:

Paquete quirúrgico estéril desechable, diseñado para procedimientos de cadera. Sus componentes, mantienen una adaptación de cobertura resistente e impermeable en la zona de cirugía a intervenir. Su campo en U y superior presentes extra gruesos con refuerzo otorga mayor seguridad absorbente y resistencia al desgarro durante el procedimiento.

Nuestro paquete quirúrgico cumple con certificación **ISO 13485**.

Componentes

REF.	COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	75-1710	Toalla absorbente (40cm x 30cm)	4
B	07-20XL	Bata Quirúrgica estándar reforzada talla XL	4
C	75-1703	Cubremesa mayo reforzada 70cm x 150cm	1
D	75-1730	Bolsa para suturas (16cm x 30cm)	1
E	75-1406	Campo impermeable en "U" (150cm x 175cm) con adhesivo y fenestración (10cm x 50cm)	1
F	75-1722	Bota impermeable (30cm x 120cm)	1
G	75-1712	Cintas adhesivas (10cm x 50cm)	4
H	75-1622	Campo superior extra grueso (250cm x 150cm) con adhesivo y refuerzo absorbente (60cm x 45cm)	1
I	75-1416	Campo Ortopédico en "U" extra grueso (220cm x 270cm) con adhesivo, fenestración (10cm x 100cm) y refuerzo absorbente (60cm x 95cm)	1
J	75-1741	Paño clínico (65cm x 37cm) con cinta adhesiva (65cm x 2.5cm)	4
K	75-1615	Cubre mesa de arsenalera reforzada (110cm x 225cm)	1
L	75-ETO	Incluye testigo de esterilización interno	

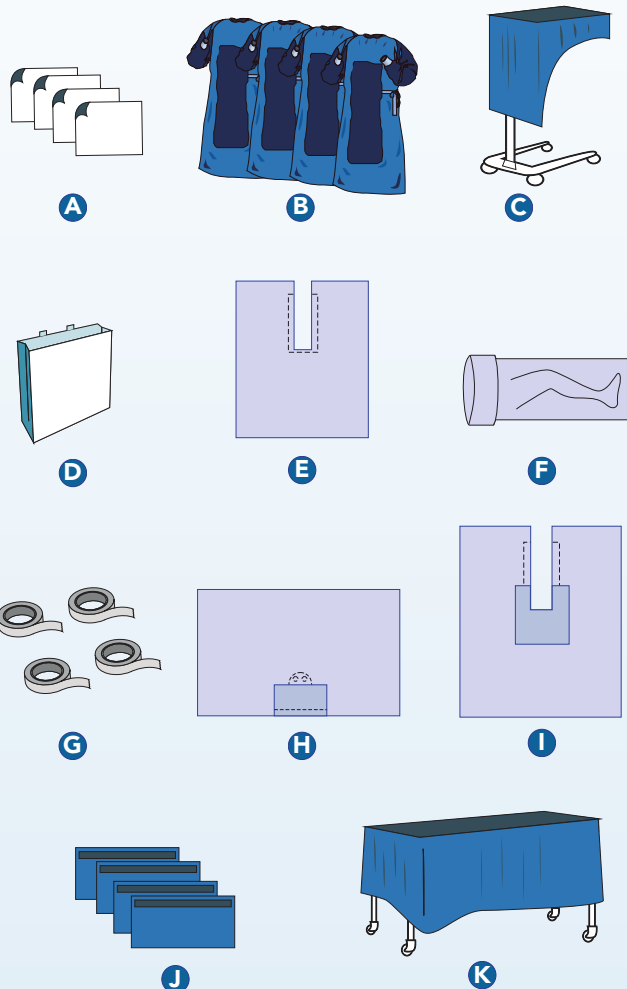

TEJIDO SMMS

Los dispositivos médicos que están conformados con material de SMMS (4 capas de polímeros de polipropileno) deben su nombre al proceso de fabricación con el cual se estructura la capa.

Los procesos se llaman:

Spunbond / Meltblown / Meltblown / Spunbond

Las dos capas externas le confieren las características de impermeabilidad (tejido hidrófugo), resistencia al rasgado y antiestático (protegiendo al paciente y sus usuarios, eliminando la electricidad estática). En resumen es una excelente barrera física. Las capas intermedias Meltblown son un filtro bacteriológico que permiten proteger al usuario y al paciente de un 99% de bacterias, transformándose en un protector biológico.

