



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Bóxer paciente con elástico en la cintura.
Marca:	Cranberry.
Material:	Tela no tejida SMS grado médico. Para más información sobre SMS leer anexo 10 .
Color:	Azul.
Tamaño:	Ver especificaciones del producto.
Presentación:	Caja x 100 unidades / cada boxer en empaque individual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Insumo médico desechable indicado para la protección, higiene y confort íntima de pacientes hombres. Idealmente usado en salas de examinación, diagnóstico y hospitalización. Se sugiere cambio diario.		
Libre de Látex:	Sí.	Estéril:	No, es un insumo limpio.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: ☒ No: ☐	Resistente:	Sí: ☒ No: ☐	Adaptable:	Sí: ☒ No: ☐
Hipoalergénico:	Sí: ☒ No: ☐	Respirable:	Sí: ☒ No: ☐	Impermeable:	Sí: ☒ No: ☐
Insumo inerte, es decir hipoalergénico. Suave y resistente. Su tamaño estándar permite un uso extendido en una amplia variedad de tamaño de usuarios.					

ESPECIFICACIONES PRODUCTO


Código Interno	Largo	Ancho elástico reposo	Ancho elástico extendido	Ancho pierna
AABOXERA	45 cm	74 cm	60 cm	30 cm

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001.
- ISO 13485 - 2016.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

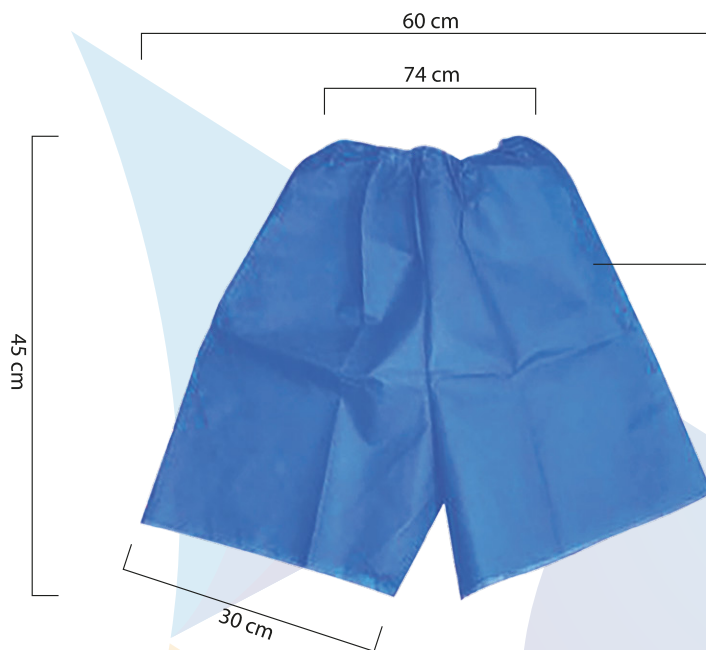

Entrega:
Protección
Higiene
Confort
íntima a pacientes hombres.

Cranberry®

PROVEEDOR
ChileCompra
Express
Tienda virtual de Convenios Marco

Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica V-00 **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

✉ contacto@reutter.cl

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL SMMMS

Los dispositivos médicos que están conformados con material de SMMMS (5 capas de polímeros de polipropileno) deben su nombre al proceso de fabricación con el cual se estructura la capa. Los procesos se llaman Spunbond / Meltblown x 3/Spunbond, de ahí su nombre SMMMS. Las dos capas externas le confieren las características de impermeabilidad al tejido (hidrófugo), resistencia al rasgado y antiestático (protegiendo al paciente y sus usuarios, eliminando la electricidad estática), convirtiéndose en una excelente barrera física.

Las capas intermedias Meltblown son un filtro bacteriológico que permite proteger al usuario y al paciente de un 99% de bacterias y microorganismos transformándose en una protección biológica.

¿ CÓMO SE OBTIENE SMMMS ?

Este es un tejido no tejido que se obtiene mediante un proceso de adhesión térmico de 5 láminas, los dos exteriores son fabricados con tecnología Spunbond y las capas internas con tecnología Meltblown.

Tanto las capas externas como internas están estructuradas por un polímero de polipropileno al cual se le inyectan grandes cantidades de aire a temperatura elevada y a gran velocidad para atenuar los filamentos, cuando una densa capa aglomerada de polipropileno es sometida a este proceso se obtienen láminas de SMMMS.

